



## Pèse-personnes KERN MPK • MPL


Pèse-personnes à colonne pour une utilisation pratique et ergonomique



KERN MPL 200K-1P

KERN MPK 200K-1P

**Votre KERN revendeur spécialisé**

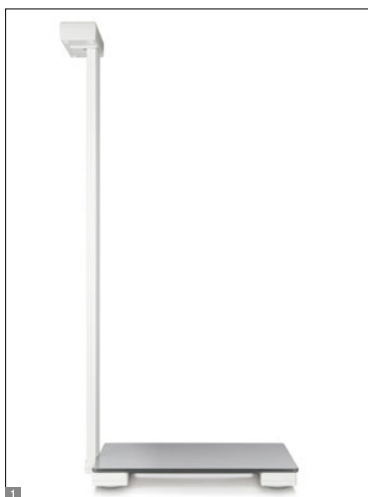

### Caractéristiques

- Ce pèse-personne est l'instrument de mesure idéal pour la gériatrie, le secteur paramédical, les clubs de sport ou les particuliers, y compris pour des mesures d'obésité allant jusqu'à 250 kg
- Grâce à la colonne fixée à la balance, l'appareil d'analyse est simple à utiliser et la valeur de pesée est facile à lire même dans de mauvaises conditions lumineuses
- Plateau en verre stable pour une bonne tenue et une utilisation confortable
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Construction particulièrement plate pour faciliter l'accès
- Grande simplicité d'utilisation : Toucher - monter dessus - lire le poids

- Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles
- KERN MPL : Fonction IMC pour le calcul du sous-poids/poids normal/surpoids
- Conversion d'unités possible entre kg et lb
- Grand écran LCD contrasté pour une lecture aisée
- KERN MPL : Fonction d'ajustage et fonction de tare pour la mise à zéro de la balance
- Livraison avec emballage individuel
- Programme d'ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe

### Caractéristiques techniques

- Écran LCD, hauteur de chiffres 28 mm
- Dimensions plateau
- L×P×H 350×350×45 mm
- Dimensions totales (colonne incluse) L×P×H 350×420×955 mm
- Piles incluses, 4×1,5 V AA, autonomie jusqu'à 20 h
- Poids net env. 3,8 kg

### Accessoires

- Lingettes de nettoyage, lingettes sans alcool pour nettoyage désinfectant, efficacité rapide, à base de composés d'ammonium quaternaire modernes, également contre les papovavirus. Particulièrement douces pour les matériaux, donc bien adaptées à la désinfection de produits médicaux sensibles à l'alcool. Conformes aux exigences légales des directives TRGS 525/540 concernant la sécurité au travail. Comprend 80 lingettes de 20×22 cm, KERN MYC-01

EN SÉRIE



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	
KERN			
MPK 200K-1P	250	0,1	
MPL 200K-1P	250	0,1	

### Pictogrammes



**Programme d'ajustage externe (CAL) :**  
pour régler la précision de la balance. Poids de contrôle externe nécessaire



**Unités de mesure :**  
convertibles par ex. pour passer à des unités non métriques. Plus de détails : voir Internet



**Fonctionnement avec pile :**  
préparé pour fonctionner sur pile. Le type de pile est indiqué pour chaque appareil



**Principe de pesée : Jauges extensométriques**  
résistance électrique sur corps de déformation élastique



**Expédition de colis :**  
la durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme